

TERVETULOA TESTAAKOTONA.FI -PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI!

Tämä näytteenottopaketti sisältää tarvittavat välineet laboratorionäytteen ottamiseen ja lähettämiseen. Lähettämäsi näyte analysoidaan sertifioidussa laboratoriossa asiantuntijoiden toimesta. Palvelun tarjoaa SYNLAB Suomi.



KIHOMATOTESTI

HUOMIOITAVAA

- Näyte otetaan aamulla heti heräämisen jälkeen ja ehdottomasti ennen ulostamista ja peseytymistä.
- Näytteenottotikku on kertakäyttöinen, ja se tulee laittaa näytteenoton jälkeen putkeen kokonaisuena, ja varmistaa että putki sulkeutuu kunnolla.
- Pakkauksessa on kaksi näytteenottoputkea ja -tikkua, joilla voi ottaa näytteet kahtena eri aamuna. Kihomadot eivät käy munimassa joka yö, ja siksi näytteet suositellaan otettaviksi eri aamuina.
- Muista hyvä käsihygienia näytteenoton jälkeen, jotta mahdollinen tartunta ei leviä.

NÄYTTEENOTTO


1. Pakkauksessa on kertakäyttöinen näytteenottotikku omassa putkessaan. Avaa putki ja ota näytteenottotikku ulos. Kasta näytteenotto-tikun nukkapää halutessasi hanavedessä ennen näytteen ottamista.
2. Hankaa näytteenottotikun nukkapäällä melko voimakkaasti peräaukon poimuja, ja työnnä tikun pää peräaukkoon hetkeksi noin 0,5 cm:n syvyyteen.
3. Työnnä näytteenottotikku putkeen. Tarkasta että korkki on kiinni kunnolla, ja laita putki laatikossa olevaan minigrip-pussiin.
4. Ota toinen näyte samoin kuin ensimmäinen, ja laita näytteenottoputki samaan minigrip-pussiin. Tarkasta että pussi on suljettu tiiviisti.
5. Laita näytteet lähetyslaatikkoon ja sulje laatikko huolellisesti.
6. Postita näyte. Postimaksu on maksettu valmiiksi.

TULOKSEN VALMISTUTTUA


Tuloksen valmistuttua saat tekstiviestin tilausvaiheessa antamaasi puhelinnumeroon. Näet tuloksesi tunnistauduttuasi pankkitunnuksillasi omille sivuillesi osoitteessa testaakotona.fi/katsotulos.

- Jos näytteessä ei havaita kihomadon munia, mutta oireet jatkuvat, voit tilata uuden testipakkauksen. Kihomadot eivät välttämättä käy munimassa joka yö, joten uusintänäytteet lisäävät todennäköisyyttä sille, että näytteeseen saadaan kerättyä kihomadon munia.
- Jos näytteessä havaitaan kihomadon munia, infektiota voidaan hoitaa joko apteekista käsikauppatuotteena saatavalla lääkkeellä tai reseptilääkkeellä, johon reseptin saa lääkäriltä.


1

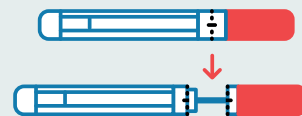


2

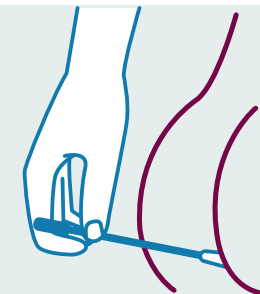

3

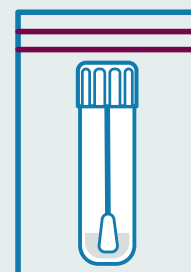

4

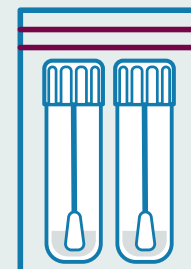

5



6



SE – Springmasktest

- Ta provet genast efter att du vaknat på morgonen innan du tvättar dig eller tömmer tarmen.
 - Provtagningspinnen är avsedd för engångsbruk och ska efter provtagningen läggas hel i röret. Röret ska stängas ordentligt.
 - I förpackningen finns två provtagningspinnar i separata rör. Springmaskar lägger inte ägg varje natt, så det är bra att ta proven på olika morgnar.
 - Kom ihåg god handhygien efter provtagningen för att eventuell springmasksmitta inte ska spridas.
1. I förpackningen finns två disponibela provstickor i sina egna rören. Öppna röret och ta stickprovet sticker ut. Om du vill kan du fukta änden av provtagningspinnen i kranvatten innan du tar provet.
 2. Gnugga huden kring ändtarmsöppningen tämligen kraftigt med änden av provtagningspinnen och för sedan in pinnen i ändtarmen till ett djup av cirka 0,5 cm under en stund.
 3. Lägg pinnen tillbaka i röret. Kontrollera att korken sitter på ordentligt och lägg röret i den Minigrip-påse som finns i lådan.
 4. Ta också ett annat prov liksom det första. Lägg det andra provröret följande morgon i samma påse. Se till att Minigrip-påsen är väl tillsluten.
 5. Slut påsen tätt och placera den i förpackningslådan. Tillslut lådan noggrant genom att vika de små flikarna in i hålen som finns i förpackningens sidor.
 6. Posta förpackningen. Postavgiften är färdigt betald.

ENG – Threadworm test

- The sample is collected immediately upon waking up, strictly before defecation or washing.
 - The sampling swab is disposable and it should be placed in the tube as a whole after the sample collection. Make sure the tube is carefully closed.
 - The package includes two disposable sampling swabs, each in their own tube. Threadworms do not lay eggs every night so we recommend taking the samples on different mornings.
 - Remember to take care of good hand hygiene after collecting the sample to prevent any possible threadworm infections.
1. Packaging contains a disposable sampling stick in its own tube. If you so wish, you can dip the fluffy end of the sampling swab in tap water before collecting the sample.
 2. Rub the sampling swab quite strongly against the skin around the anus and insert the end of the swab in the anus to a depth of approximately 0.5 cm.
 3. Insert the swab back into the tube. Check that the cap is tightly closed and place the tube in the plastic ziplock bag in the package.
 4. Take another sample same way as the first one. Place the sample tube from the following morning in the same bag. Check that you have closed the plastic bag carefully.
 5. Close the box carefully by inserting the wing-lets into the slots in the corners.
 6. Send the box in via regular mail. The postage is prepaid and no stamp is needed.



TITTA PÅ ANALYSRESULTATET

Så snart ditt prov har analyserats får du ett SMS. Du kan kolla upp dina resultat från **testaakotona.fi** webbplats när du loggat in med ditt bank-ID.



CHECKING THE ANALYSIS RESULT

Once your sample has been analysed, you'll receive a text message. You can check your results from the **testaakotona.fi** website after you have logged in with your bank ID.