

TERVETULOA TESTAAKOTONA.FI -PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI!

Tämä näytteenottopaketti sisältää tarvittavat välineet laboratorionäytteen ottamiseen ja lähettämiseen. Lähettämäsi näyte analysoidaan sertifioidussa laboratoriossa asiantuntijoiden toimesta. Palvelun tarjoaa SYNLAB Suomi.



SALMONELLATESTI

HUOMIOITAVAA

- Salmonellatutkimus on herkkä lämpötilojen muutokselle ja pitkälle säilytysajalle. Salmonellanäyte otetaan bakteerikuljetusputkeen, joka sisältää nestemäistä säilöntäainetta. On tärkeää, että ulostenäyte on kokonaan nestemäisessä säilöntäaineessa.
- Postita näyte samana päivänä, kun otat näytteen. Jos otat näytteen illalla, säilytä näyte yön yli jääkaapissa ja toimita se postiin seuraavana aamuna.






NÄYTTEENOTTO

- Tarkista, että paketissa ja irrallisessa mukana tulleessa viivakoodissa on sama koodi.
- Aseta näytteenotto-pakkauksesta löytyvä kertakäyttöinen kääre WC-istuimelle ja ulosta kääreen päälle.
- Avaa kuljetusputken suojarahkaus. Ota sieltä näytteenottotikku ja työnnä sen pää ulosteeseen siten, että siihen tarttuu ulostetta kuvan osoittama määrä.
- Avaa kuljetusputken korkki, aseta näytteenottotikku putken pohjalle ja katkaise tikku putken suuta vasten. Sulje putken korkki tiukasti kiertämällä.
- Kiinnitä paketin sisällä tullut viivakooditarra kuljetusputken pitkittäin.** Kirjaa näytteenottopäivä minigrip-pussin päällä olevaan tarraan.
- Aseta pussi kuljetuslaatikkoon niin, että putki sijoittuu geelipussin uraan. Laita keltainen lämpöeristekansi paikoilleen ja sulje pakkauslaatikko kääntämällä pienet siivekkeet laatikon reunojen koloihin.
- Postita näyte mahdollisimman pian viemällä se postitoimipaikkaan. **Näytettä ei saa jättää postilaatikkoon.**

TULOKSEN VALMISTUTTUA

Tuloksen valmistuttua saat tekstiviestin tilausvaiheessa antamaasi puhelinnumeroon. Näet tuloksesi tunnistauduttuasi pankkitunnuksillasi omille sivuillesi osoitteessa testaakotona.fi/katsotulos.

- Jos näytteessä ei ole havaittu Salmonellaa, saat halutessasi tallennettua tai tulostettua Salmonella-todistuksen.
- Jos näytteestäsi löytyy Salmonella, ilmoita Salmonella-löydöksestä välittömästi työnantajallesi! Ota myös yhteyttä työterveyshuoltoosi saadaksesi lisäohjeita.

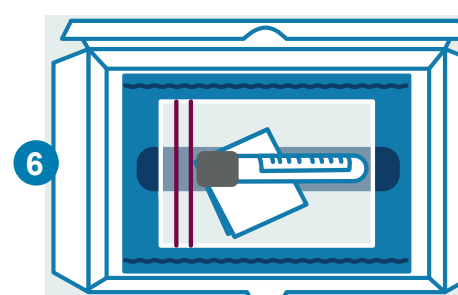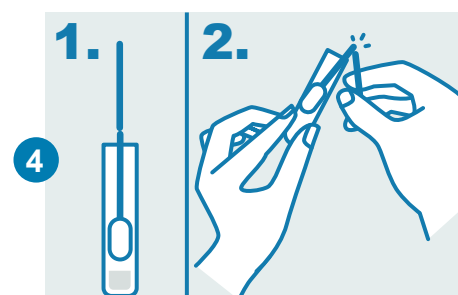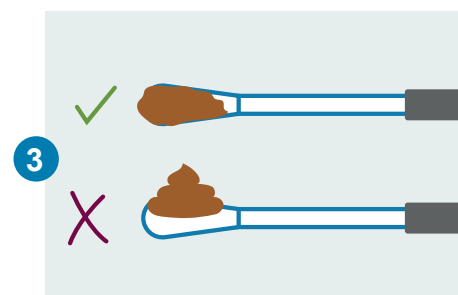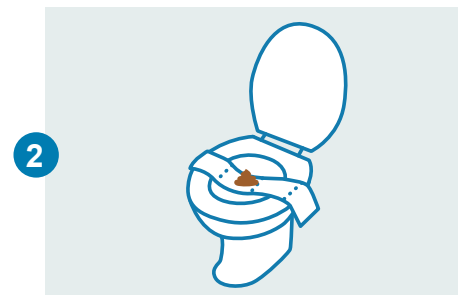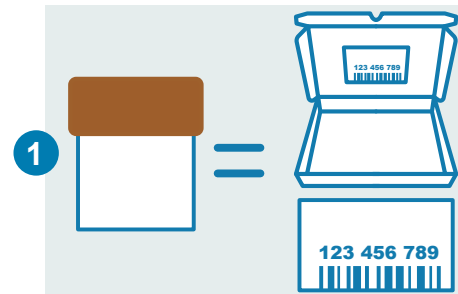

SE – Salmonellatest

- Salmonellatest är känslig för temperaturförändringar och lång förvaringstid. Salmonellaprov tas i ett transportrör som innehåller flytande konserveringsmedel. Det är viktigt att avföringsprovet ligger helt under det flytande konserveringsmedlet.
 - Det är bäst att ta provet på morgonen och skicka det under samma dag. Om du tar provet på kvällen, förvara det i kylskåp.
1. Kontrollera att förpackningen och den lösa streckkodsetikett som finns med i förpackningen har samma kod.
 2. Lägg engångsomslaget på toalettstolen. Ta avföring på omslaget.
 3. Öppna skyddsförpackningen som innehåller transportröret. Ta provtagningspinnen, stick ned änden av pinnen i avföringen och ta så mycket avföring som visas på bilden.
 4. Skruva av korken på transportröret. Placera provtagningspinnen i röret och bryt av den mot kanten på röret. Skruva på korken ordentligt. Provtagningspinnens övre ände fastnar i korken.
 5. Fäst streckkodsetiketten på längden på transportröret. Skriv provtagningsdatumet på etiketten på påsen.
 6. Lägg röret i den lilla plastpåsen där det finns en bit läskapper. Förslut påsen ordentligt. Placera påsen i transportlådan så att röret ligger i fåran på gelpåsen. Lägg på det gula, värmeisolerade locket.
 7. Stäng lådan ordentligt genom att trycka in flikarna. Skicka provet så snart som möjligt genom att föra det till postkontoret. Portot är betalt.

ENG – Salmonella test

- Salmonella test is delicate to changes in temperature and long storage times. The salmonella sample is collected to the bacteria delivery tube that contains a liquid preservative. It is important that the faecal sample is completely in the liquid preservative and that the sample is mailed to the laboratory as soon as possible after the collection.
 - We recommend collecting the sample in the morning and sending it on the same day. If you collect the sample in the evening, store it in the fridge overnight.
1. Check that the packaging and the included separate barcode have the same code.
 2. Set the disposable wrap in the packaging on the toilet as instructed in the picture. Defecate on the wrap.
 3. Open the protective packaging of the transport tube. Pick up the sampling swab from the protective packaging and insert the swab's end in the faeces so that faeces will be collected on the swab as instructed in the picture.
 4. Open the cap of the transport tube, set the swab on the bottom of the tube and break the swab against the mouth of the tube. Close the cap tightly by twisting it. The broken end of the sampling swab will be adhered to the cap.
 5. Attach the barcode sticker included in the package to the transport tube vertically. Record the sampling date on the sticker on the bag.
 6. Insert the tube in a small plastic bag included in the package. The plastic bag includes a piece of blotter. Close the bag tightly. Set the bag in the transport box so that the tube is in the gel bag's groove. Place the yellow thermal insulation lid on the box.
 7. Close the cardboard box carefully by folding the wings inside. Mail the sample as soon as possible by bringing it to the post office. Sample should not be left in the mailbox. Postage has been paid in advance.



TITTA PÅ ANALYSRESULTATET

Så snart ditt prov har analyserats får du ett SMS. Du kan kolla upp dina resultat från **testaakotona.fi** webbplats när du loggat in med ditt bank-ID.



CHECKING THE ANALYSIS RESULT

Once your sample has been analysed, you'll receive a text message. You can check your results from the **testaakotona.fi** website after you have logged in with your bank ID.